



Dried Blood Spot Collection






Do not write name

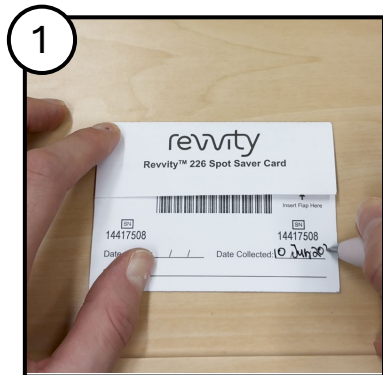


Use soap

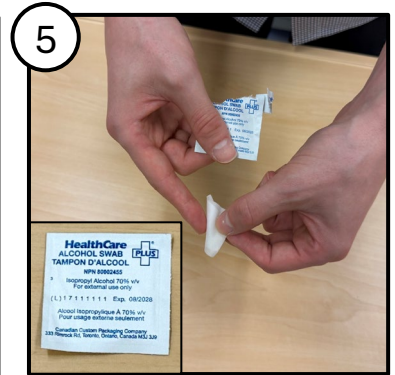


Air dry after wipe

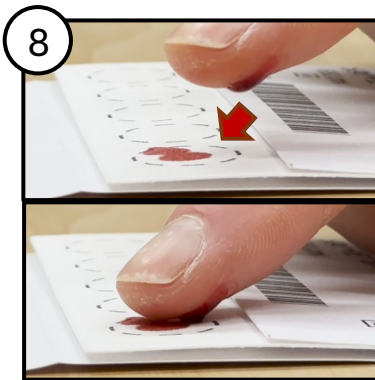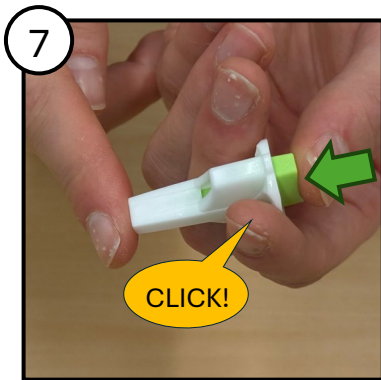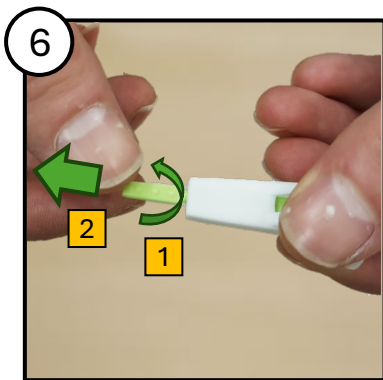


Do not press
finger to card

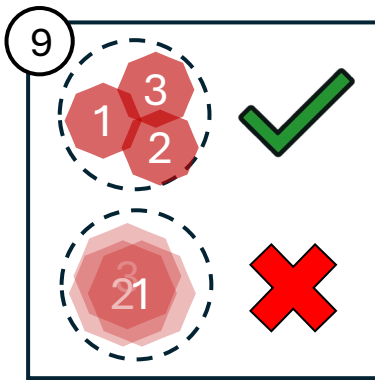




Do not layer spots

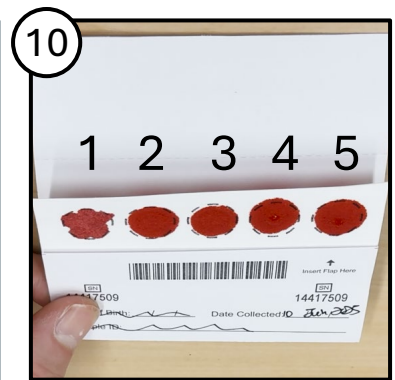


Minimum 3 circles

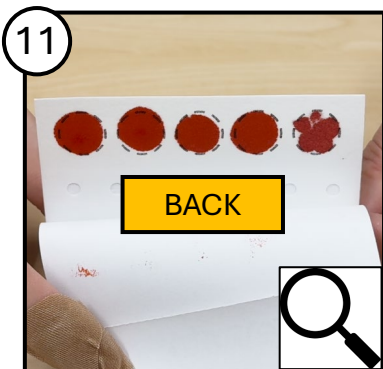

If needed

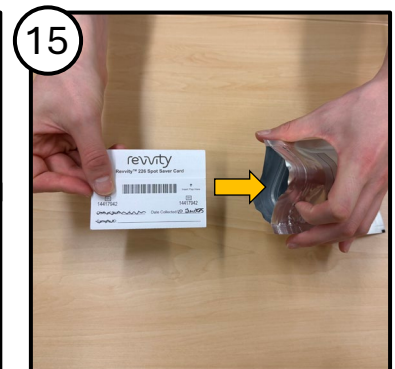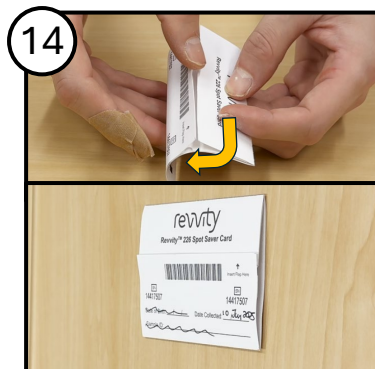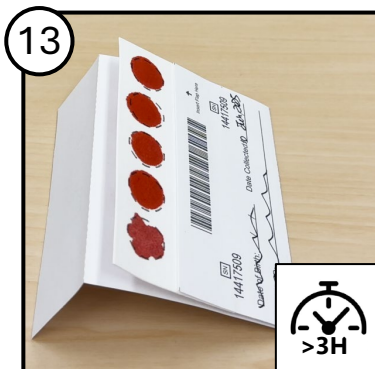

Examples:

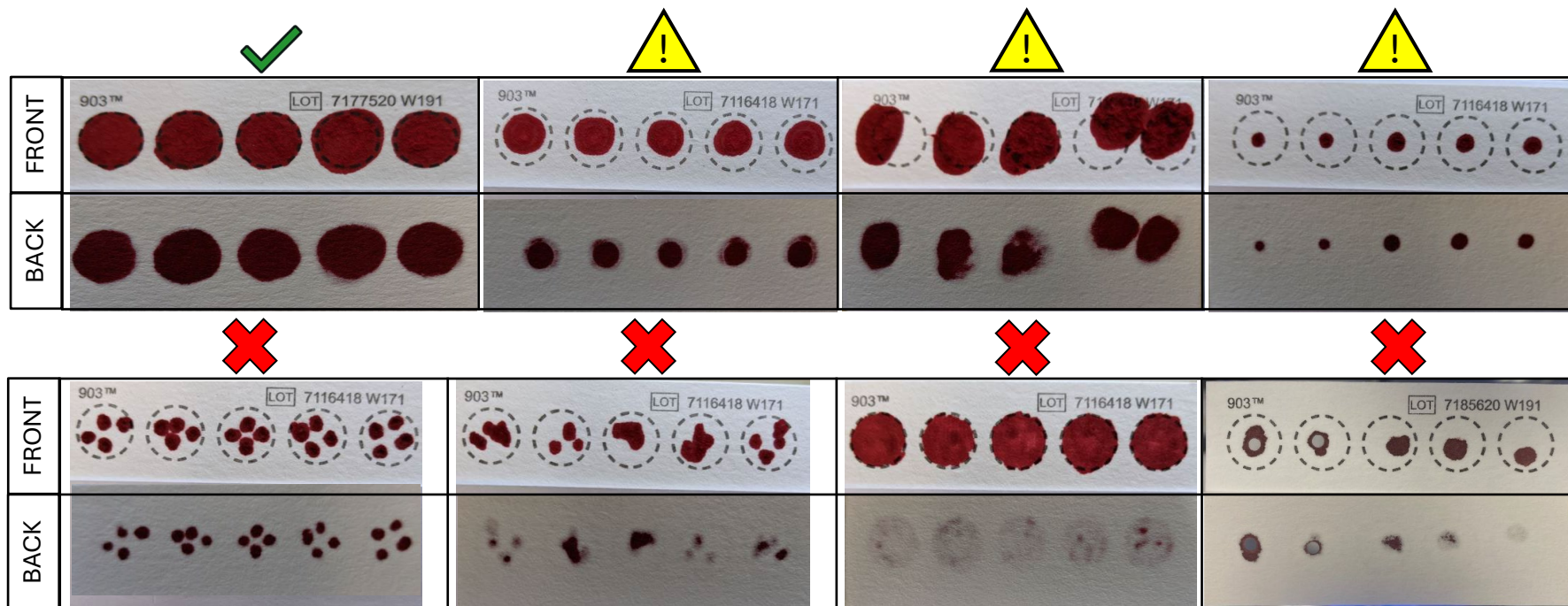


Having Trouble?


- Stand up
- Gently squeeze or massage finger
- Use extra lancet on another finger if needed
- View instructional video via QR code



Saliva Collection

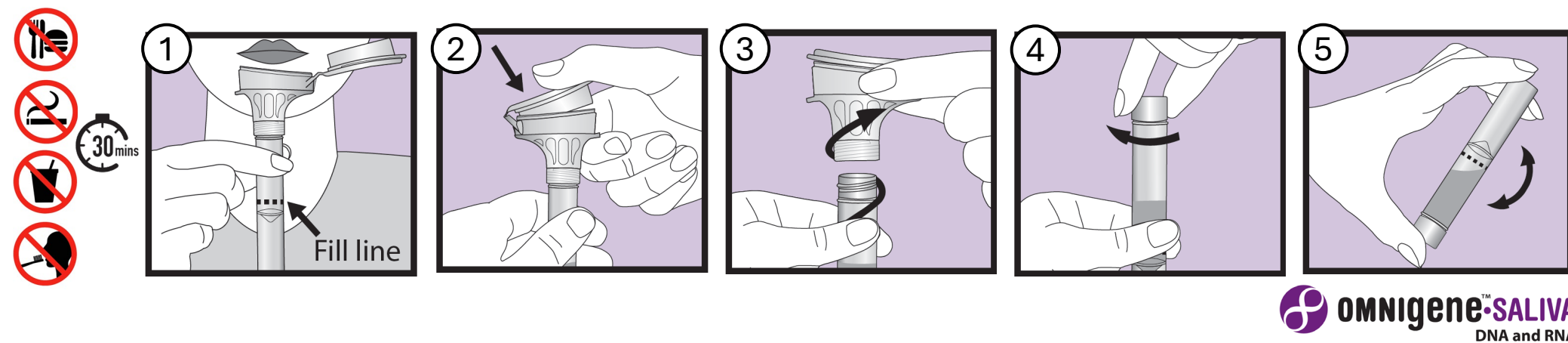

Prepare Sample Shipment

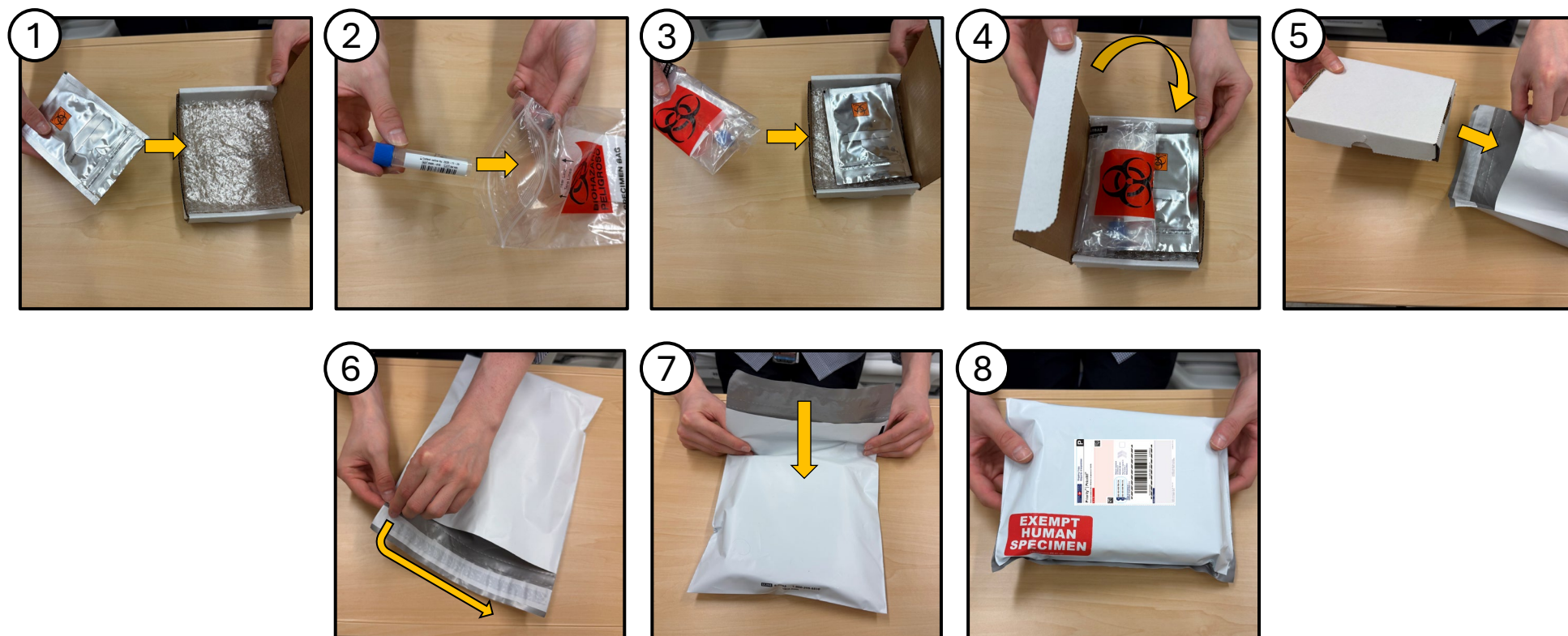

Contents




5 x Collection kits, containing:

- A. White mailer box
- B. Omnigene saliva collection kit
- C. Plastic sealable biohazard bag
- D. Dried blood spot card
- E. Silver sealable pouch
- F. Lancet (2)
- G. Alcohol pad (2)
- H. Adhesive bandage (2)


1 x Extra supplies bag, containing:

- Lancet (2)
- Alcohol pad (2)
- Adhesive bandage (2)


5 x Prelabeled mailing envelopes

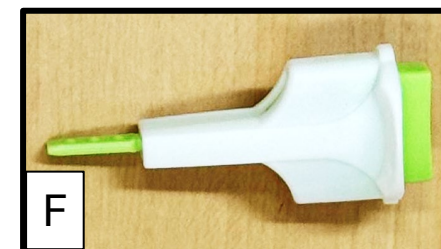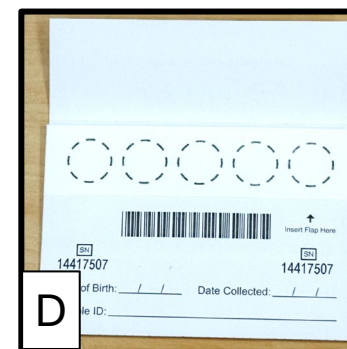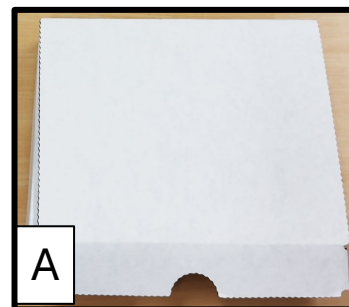


Collections d'échantillons de sang séché

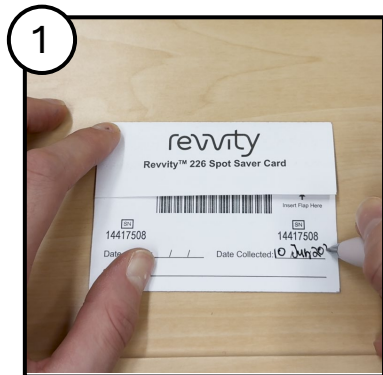




N'écrivez pas un nom

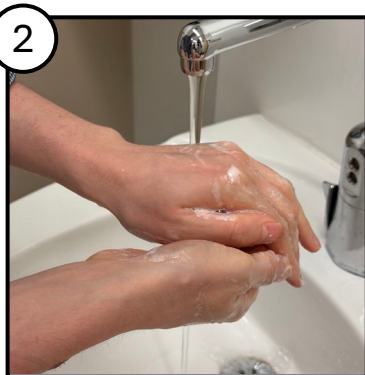


Utilisez du savon

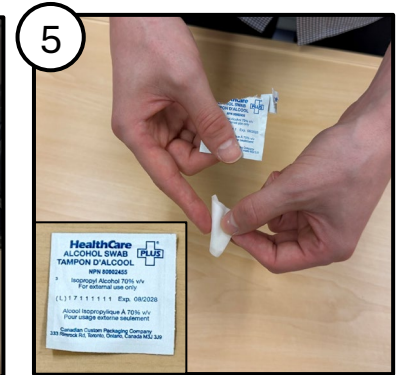


Sécher à l'air
après essuyage

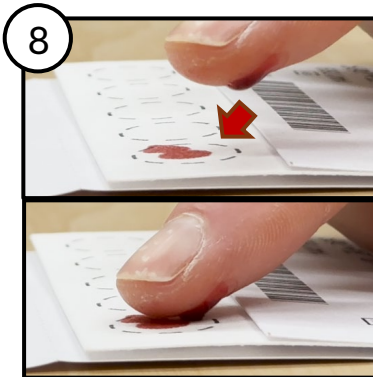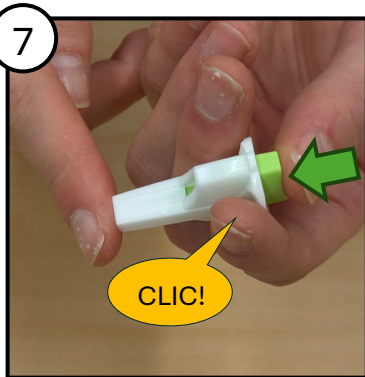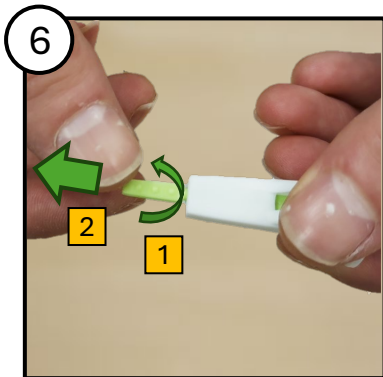


Ne pas presser le doigt
sur la carte

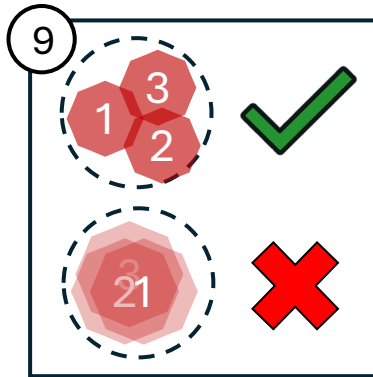




Ne pas superposer
les gouttes

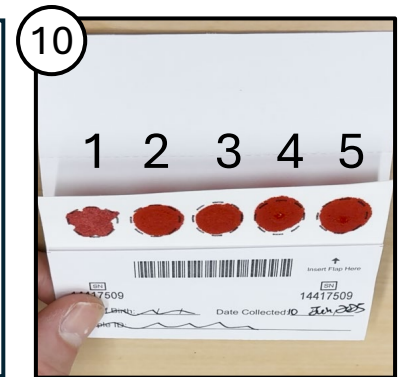


Au moins 3 cercles

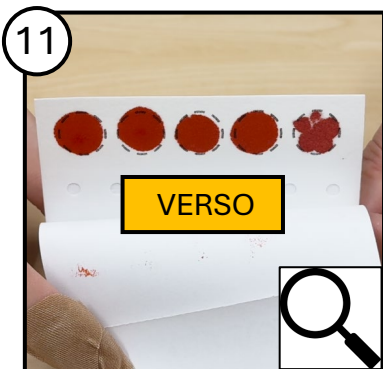

Au besoin

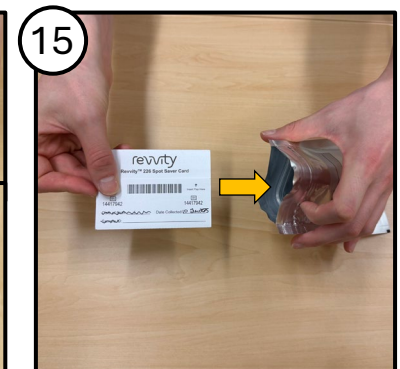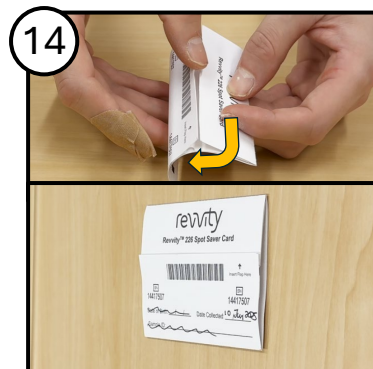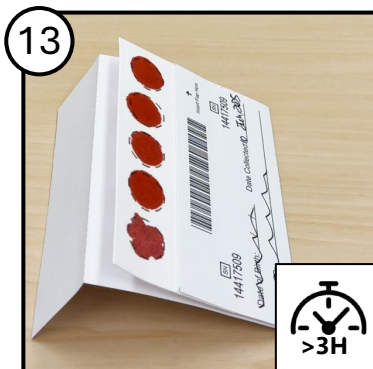

Exemples:

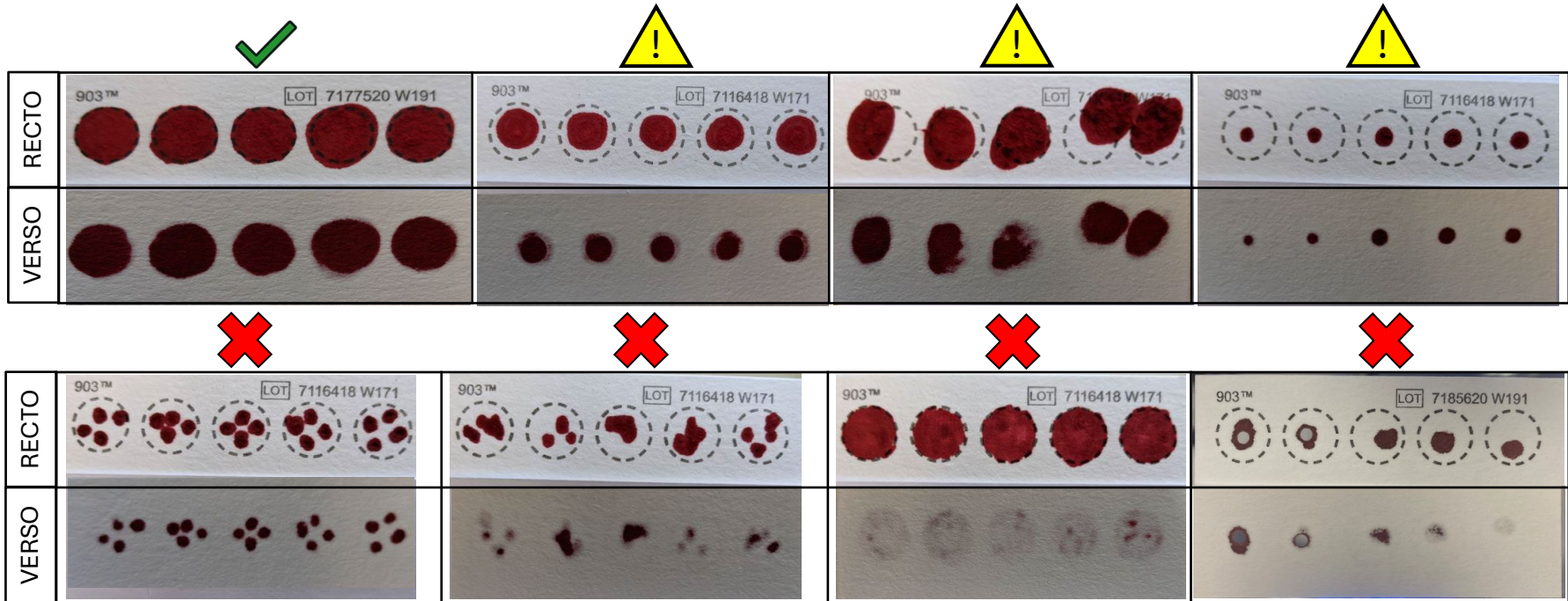


Des difficultés?

- Levez-vous
- Pressez ou massez doucement le doigt
- Utilisez une lancette supplémentaire sur un autre doigt au besoin
- Visionnez la vidéo explicative en scannant le code QR




Prélèvement de salive

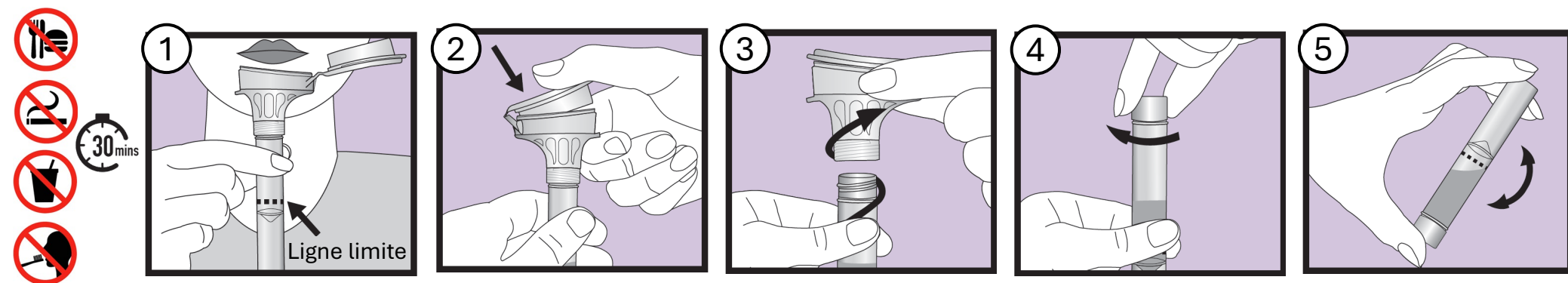

omnigene™-SALIVA
DNA and RNA

Préparer l'envoi des échantillons

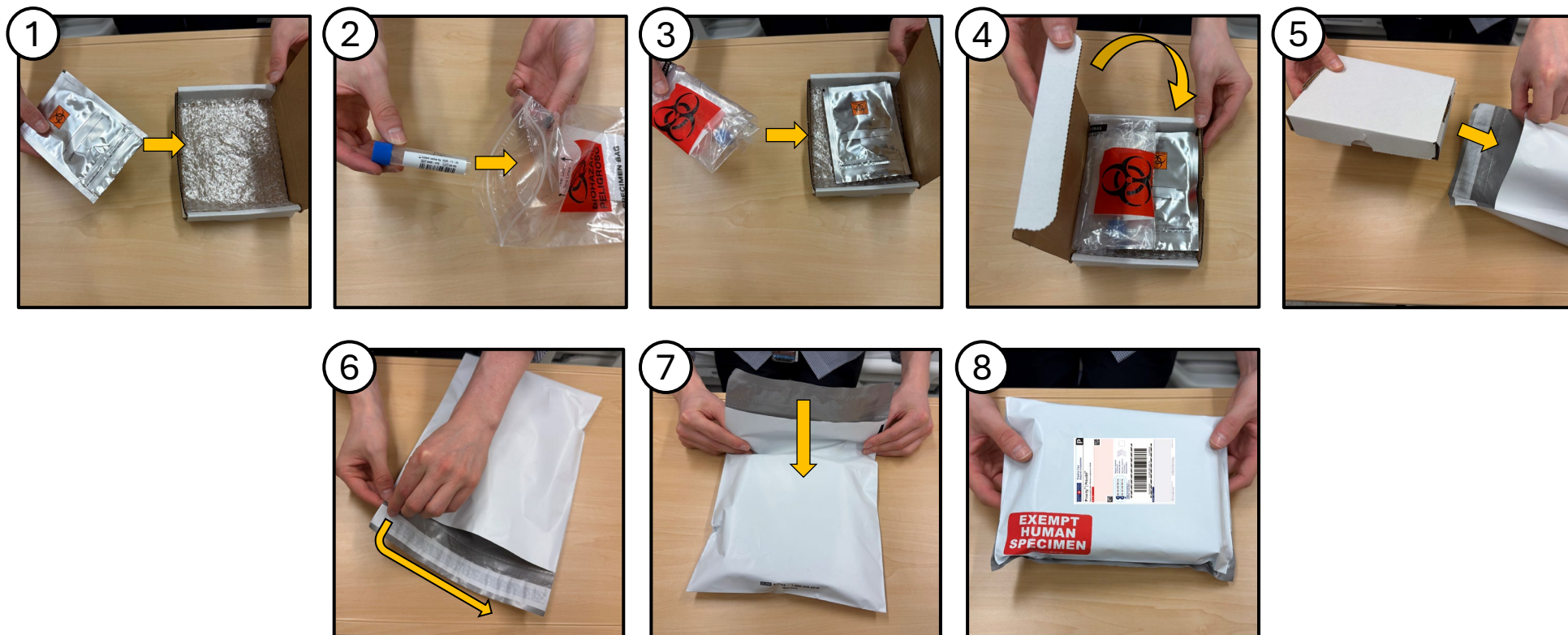

Contenu de la trousse



5 x Trousses de prélèvement, contenant:

- A. Boîte postale blanche
- B. Trousse de prélèvement de salive Omnigene
- C. Sac biohazard refermable
- D. Carte d'échantillons de sang séché
- E. Pochette argentée
- F. Lancettes (2)
- G. Tampons alcoolisés (2)
- H. Pansements (2)


1 x Sac de fournitures supplémentaires, contenant :

- Lancettes (2)
- Tampons alcoolisés (2)
- Pansements (2)

5 x Enveloppes d'expédition préétiquetées

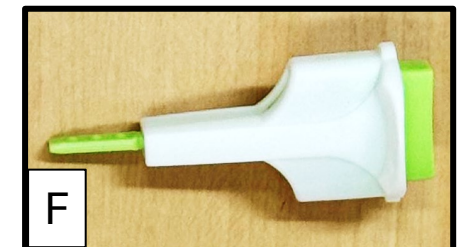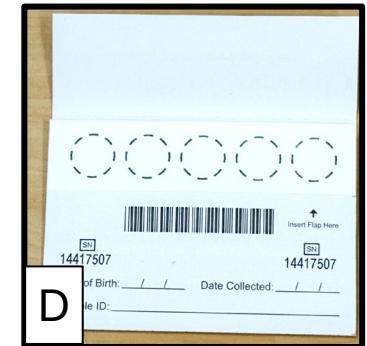


Recolección de muestra de sangre seca

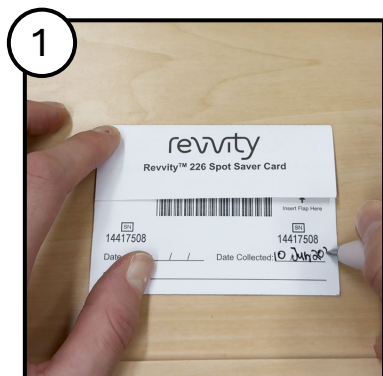




No escriba el nombre




Use jabón

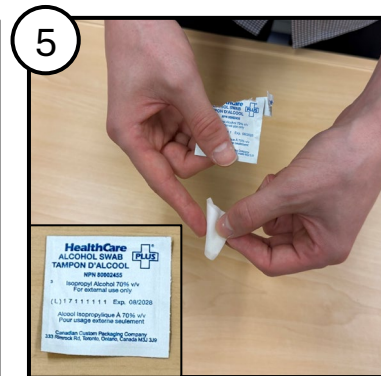


Dejar secar al aire
después de limpiar

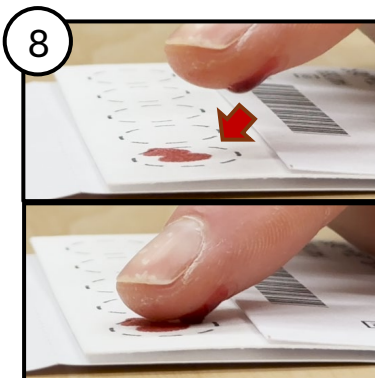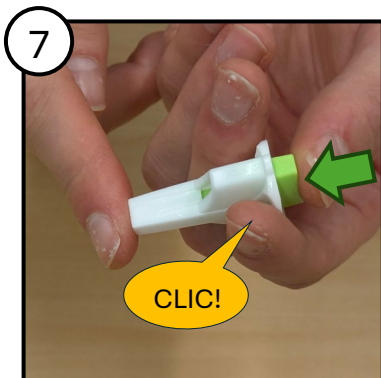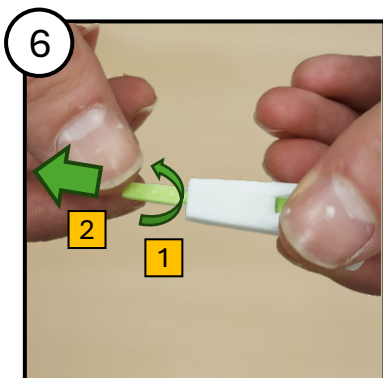


No presione el dedo
contra la tarjeta

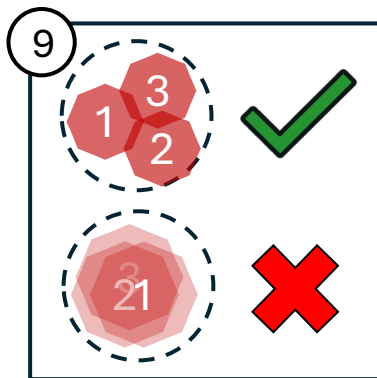




No apile las gotas

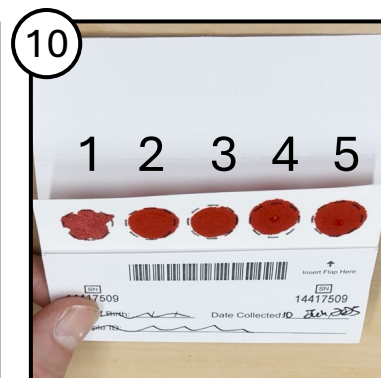


Mínimo 3 círculos

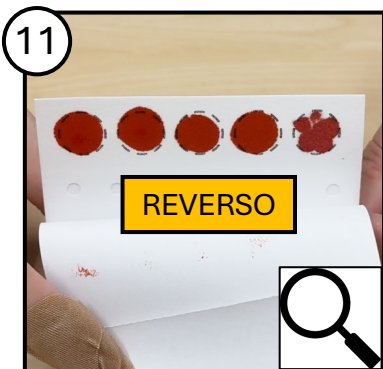

Si es necesario

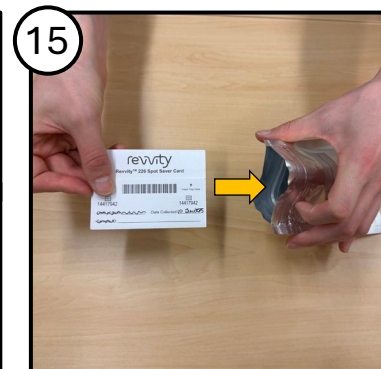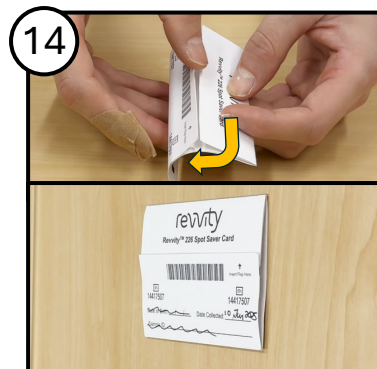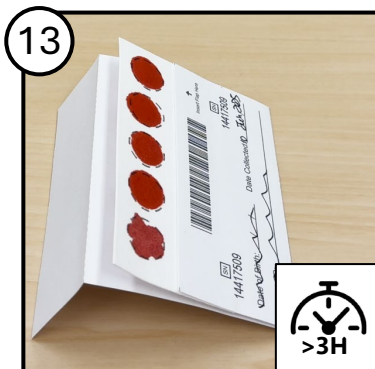

Ejemplos:

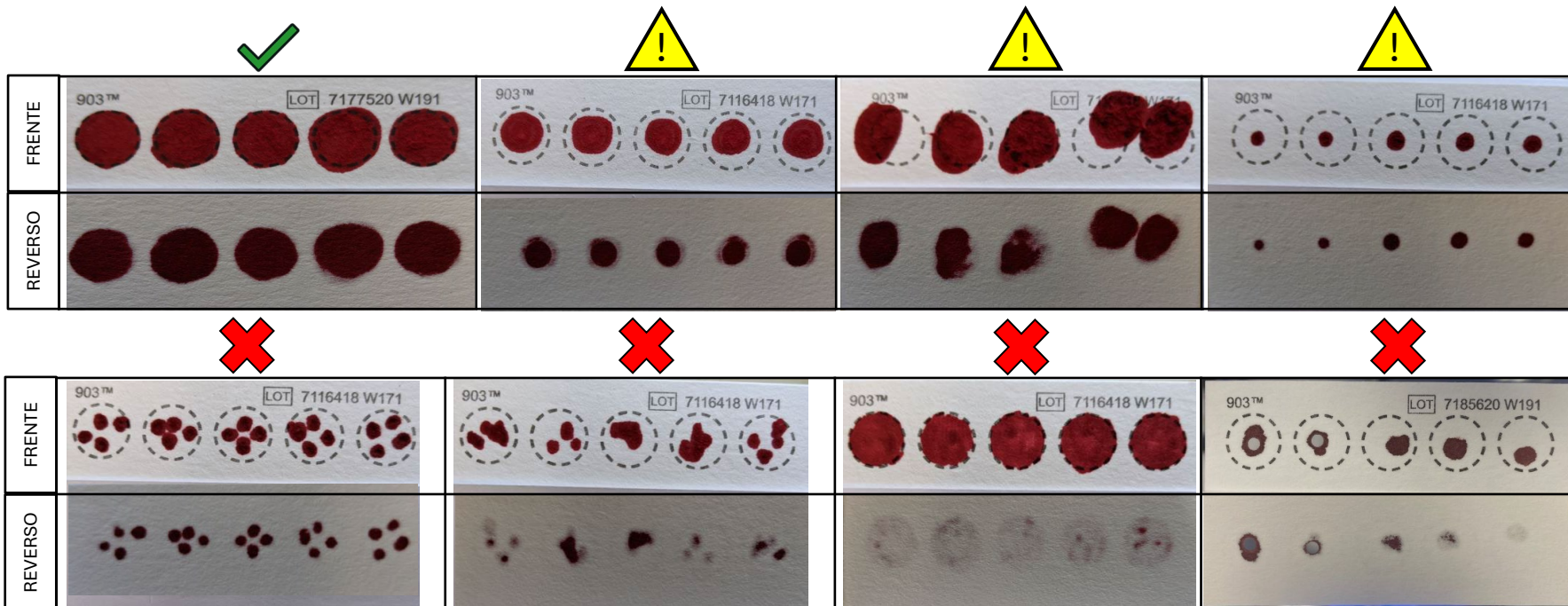


¿Tiene problemas?


- Párese
- Presione o masajee suavemente el dedo
- Use una lanceta adicional en otro dedo si es necesario
- Ve a el video instructivo escaneando el código QR



Recoleccion de saliva

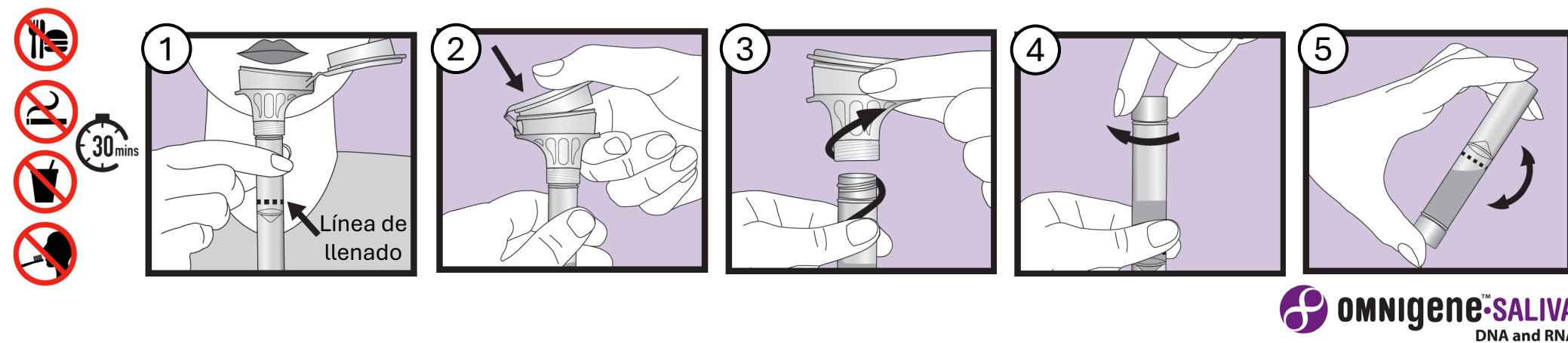

Prepare el envío de la muestra

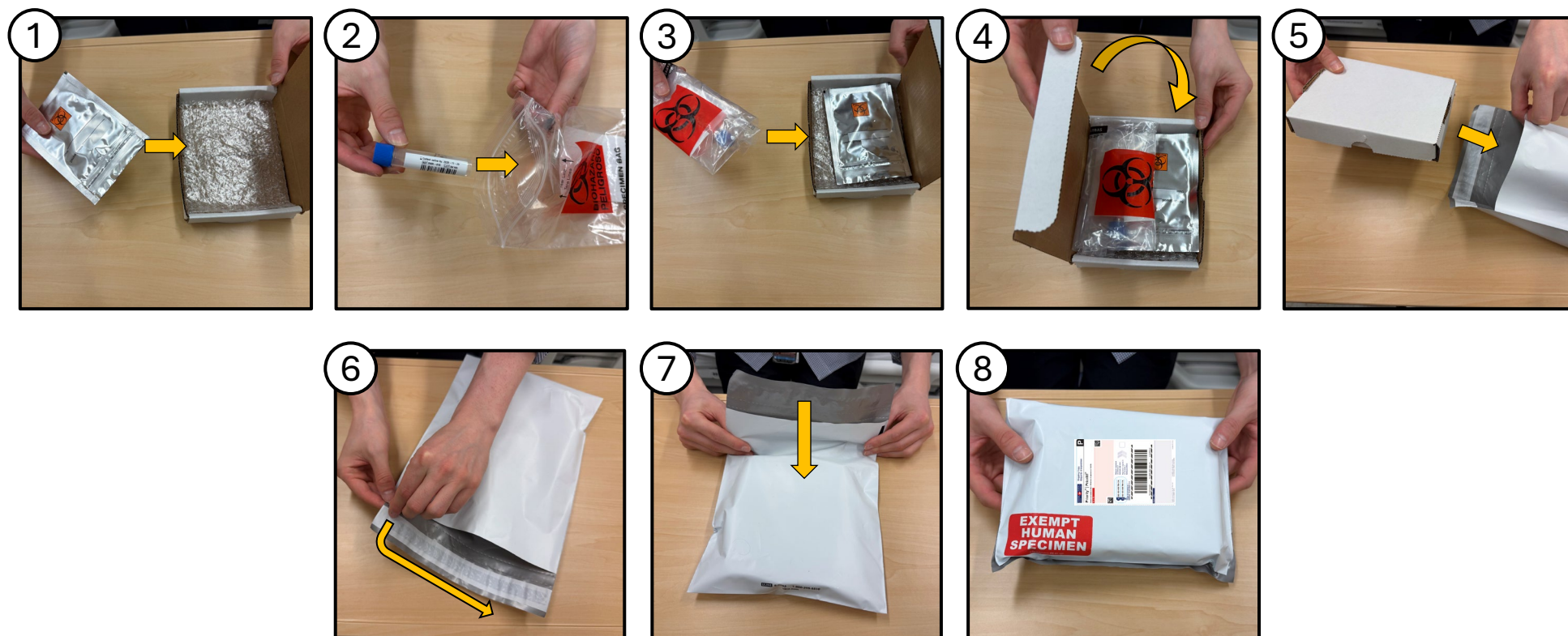

Contenido

5 x Kits de recolección, que incluyen:

- A. Caja postale blanca
- B. Kit de recolección de saliva Omnigene
- C. Bolsa de plástico de riesgo biológico
- D. Tarjeta de recolección de sangre seca
- E. Bolsa plateada resellable
- F. Lancetas (2)
- G. Almohadillas con alcohol (2)
- H. Curitas o tiritas (2)

1 x Bolsa con suministros adicionales, que incluyen :

- Lancetas (2)
- Almohadillas con alcohol (2)
- Curitas o tiritas (2)

5 x Sobres de envío preetiquetados

